

Melilax

MIKROKLIZMA S KOMPLEKSOM PROMELAXIN

Posebna bočica s mijehom
Posebna stišljiva plastenka
Easy Use
+ jednostavan za primjenu
+ preprost vnos

PATENTIRANA FORMULA



aktivni kompleks različitih vrsta meda i polisaharida iz aloje i sljeza
aktivni kompleks različitih vrst medu in polisaharidov iz aloje in slizenovca

Dvostruko djelovanje - Olakšava pražnjenje crijeva bez iritacije i istovremeno štiti rektalnu sluznicu
Dvojno delovanje - Olajša črevesno praznjenje brez draženja in obenem štiti rektalno sluznico

gluten free

MEDICINSKI PROIZVOD Klasa IIb - MEDICINSKI PRIPOMOČEK Razreda IIb

Melilax je inovativna mikrokлизma na bazi meda, koja ujedinjuje uravnoteženo pražnjenje sa zaštitnim i umirujućim djelovanjem na rektalnu sluznicu, kako bi se ublažila nelagoda, iritacija i upala uzrokovana opstipacijom (zatvorom). **Za dvostruko djelovanje proizvoda Melilax** odgovoran je **PROMELAXIN**, aktivni kompleks meda od nektara i medljike koji su pažljivo odabrani i obrađeni na temelju njihovog sadržaja monosaharida, polisaharida i melanoidina, koji je obogaćen **frakcijom polisaharida** iz aloje i sljeza.

KAKO DJELUJE

Melilax izaziva pražnjenje bez iritacije te tako inducira fiziološki i uravnoteženi podražaj za pražnjenje crijeva. Osim toga **Melilax**, zahvaljujući svojim svojstvima nalik sluzi i svojoj viskoznosti, štiti rektalnu sluznicu tijekom prolaska stolice, oponašajući podmazujuće djelovanje fiziološke sluzi. Upravo ova svojstva, uz antioksidantno djelovanje, daju proizvodu sposobnost zaštite i smirenja sluznice, indirektno djelujući protuupalno zahvaljujući fizičkim karakteristikama proizvoda.

INDIKACIJE

Melilax je namijenjen liječenju opstipacije (zatvora), čak i u prisutnosti intestinalne preosjetljivosti (kao u slučaju iritabilnog kolona), fisura (pukotine na crijevnoj sluznici i analne pukotine) i hemoroida. Proizvod je pogodan za uporabu i tijekom trudnoće i dojenja kao i kod dojenčadi.

SASTAV

Djelatne tvari 73,2%


Promelaxin aktivni kompleks različitih vrsta meda i polisaharida iz aloje i sljeza

Sadržaj: monosaharidi $\geq 50\%$, polisaharidi (molekularna masa >20.000 daltona) $\geq 0,3\%$


Ostali sastojci: hidroglicerinska mješavina, sok limuna, eterično ulje lavande.

NAČIN PRIMJENE

1) Otvorite mikrokлизmu skidanjem sigurnosnog poklopca:

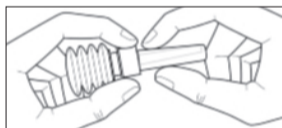

- Pridržavajte bijeli prsten iznad mijeha
- Drugom rukom savinite poklopac sve dok ne pukne i potpuno se ne odvoji od prstena

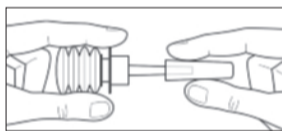

- Skinite poklopac

2) Stavite nekoliko kapi proizvoda na perianalno područje i nježno umetnite cjevčicu u rektum.

3) Pritisnite mikrokлизmu do kraja, u smjeru mijeha; na kraju primjene držite je pritisnutu sve dok cjevčica potpuno ne izađe, kako bi izbjegli da se proizvod usisa natrag.

DOZIRANJE

Odrasli i adolescenti stariji od 12 godina:

1 mikrokлизma od 10 g po potrebi. U slučaju uporne opstipacije, primijenite 2 doze, jednu za drugom.

Djeca od 3 do 12 godina:

1 mikrokлизma od 5 g po potrebi. U slučaju uporne opstipacije (zatvora) primijenite 2 doze, jednu za drugom.

Djeca od 1 do 3 godine:

1 mikrokлизma od 5 g po potrebi.

Dojenčad od 0 do 1 godine:

Polu mikrokлизme od 5 g po potrebi.

Da biste olakšali primjenu mikrokлизme, dobro je postaviti dijete na lijevi bok s koljenima savinutim prema trbuhu.

UPOZORENJA

Ne koristiti u slučaju preosjetljivosti ili alergije na jedan ili više sastojaka. U slučaju dugotrajne opstipacije (zatvora) treba se obratiti liječniku kako bi se isključila ostala bolesna stanja.

Mikrokлизma je namijenjena za jednokratnu uporabu, stoga se ne smije ponovno koristiti čak ni u slučaju davanja pola doze, kao kod dojenčadi.

Čuvati na sobnoj temperaturi, dalje od izvora topline i izravne svjetlosti. Čuvati izvan dohvata djece. Rok valjanosti odnosi se na neotvoren i pravilno čuvan proizvod.

ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti naveden je na pakiranju. Ne koristiti nakon navedenog roka valjanosti.

PAKIRANJE ZA PRODAJU

Melilax Adult: 6 mikrokлизmi s poklopcem od 10 g za jednokratnu uporabu za odrasle i adolescente

Melilax Pediatric: 6 mikrokлизmi s poklopcem od 5 g za jednokratnu uporabu za djecu i dojenčad

PATENTIRANA FORMULA: Br. patenta 102012902100704

SI Melilax je inovativna mikrokлизма na osnovi medu, ki združuje uravnoteženo odvajalno delovanje z zaščitnim in pomirjevalnim delovanjem na rektalno sluznico.

Izdelek je namenjen za odpravljanje nelagodja, draženja in vnetij, ki se pojavijo zaradi obstipacije (zaprtja).

Za **dvojno delovanje izdelka Melilax** je odgovoren **PROMELAXIN**, aktivni kompleks medu iz nektarja in medu iz medene rose, ki sta skrbno izbrana na podlagi njunih vsebnosti monosaharidov, polisaharidov in melanoidina, ki je obogaten s **polisaharidno frakcijo** iz aloe in slezenovca.

KAKO DELUJE

Melilax sproži odvajalno delovanje brez draženja in spodbudi fiziološki ter uravnotežen dražljaj za odvajanje blata.

Poleg tega **Melilax** zaradi svojih lastnosti, ki posnemajo delovanje sluzi, in zaradi svoje viskoznosti zaščiti rektalno sluznico med odvajanjem blata, pri čemer posnema mazalno delovanje fiziološke sluzi.

Te posebne lastnosti, združene z antioksidativnim delovanjem, dajejo izdelku sposobnost zaščite in pomirjanja sluznice, njegove fizikalne lastnosti pa mu omogočajo posredno protivnetno delovanje.

INDIKACIJE

Melilax je namenjen zdravljenju obstipacije (zaprtja), tudi ob sočasnem razdražljivem črevesju (kot v primeru razdražljivega kolona), prisotnosti fisur (razpoke črevesne sluznice in analne razpoke) in hemoroidih. Izdelek je primeren tudi za uporabo med nosečnostjo in dojenjem ter za dojenčke.

SESTAVA

Funkcionalne sestavine 73,2%


Promelaxin, aktivni kompleks različnih vrst medu in polisaharidov iz aloe in slezenovca

Vsebnost: monosaharidi $\geq 50\%$, polisaharidi (molekulska masa >20.000 daltonov) $\geq 0,3\%$


Vsebuje tudi: hidroglicerinsko mešanico, limonin sok, eterično olje sivke.

NAČIN UPORABE

1) Odprite mikroklizmo tako, da odstranite varnostni pokrovček:

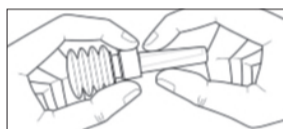

- Primite za obroček nad stisljivo plastenko
- Z drugo roko upognite pokrovček, dokler se ne odlomi in loči od obročka

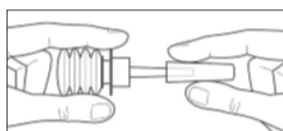

- Odstranite pokrovček

2) Nanesite nekaj kapljic izdelka na zadnjično odprtino in nežno vstavite koničasti nastavek plastenke v danko.

3) Do konca stisnite plastenko v smeri meha in jo na koncu nanosa zadržite stisnjeno, dokler koničastega nastavka ne izvlečete v celoti, da preprečite, da izdelek ponovno ne steče nazaj v plastenko.

ODMERJANJE

Odrasli in mladostniki, starejši od 12 let:

1 mikroklizma po 10 g po potrebi. Če obstipacija (zaprtje) ne preneha, uporabite 2 odmerka zapored.

Otroci od 3 do 12 let:

1 mikroklizma po 5 g po potrebi. Če zaprtje ne preneha, uporabite 2 odmerka zapored.

Otroci od 1 do 3 let:

1 mikroklizma po 5 g po potrebi.

Dojenčki od 0 do 1 leta:

Polovica mikrokлизme po 5 g po potrebi.

Za lažjo uporabo mikrokлизme obrnite otroka na levi bok in upognite njegova kolena proti trebuhu.



OPOZORILA

Ne uporabljajte, če ste preobčutljivi ali alergični na eno ali več sestavin. V primeru dolgotrajne obstipacije (zaprtja) je nujno posvetovanje z zdravnikom, da se izključijo druga bolezenska stanja.

Mikroklizma je za enkratno uporabo, zato je ne uporabite ponovno, čeprav ste uporabili le polovico odmerka, na primer pri dojenčkih.

Hranite pri sobni temperaturi, stran od virov toplote in zaščiteno pred svetlobo. Hranite izven dosega otrok. Datum izteka roka uporabnosti velja za nepoškodovan/needprt in pravilno shranjen izdelek.

ROK UPORABNOSTI

Glejte rok uporabnosti, ki je natisnjen na embalaži. Izdelka ne uporabljajte po pretečenem roku uporabnosti.

PRODAJNO PAKIRANJE

Melilax Adult: 6 mikrokлизм s pokrovčkom po 10 g za enkratno uporabo za odrasle in mladostnike.

Melilax Pediatric: 6 mikrokлизм s pokrovčkom po 5 g za enkratno uporabo za otroke in dojenčke.

PATENTIRANA FORMULA: Št. patenta 102012902100704



www.melilax.com



0373

Datum zadnje revizije - Datum zadnje posodobitve navodila: 02/2016

Aboca S.p.A. Società Agricola - Loc. Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (AR) - Italia
www.aboca.com

Tvrtka sa certifikatima za sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001 i ISO 13485 te za sustav upravljanja okolišem ISO 14001.

Podjetje s sistemom vodenja kakovosti po standardih ISO 9001 in ISO 13485 ter sistemom ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001.